

hissipörssi.fi

- esteetöntä elämää -

CIBES PARALLEL TYYLİKÄS PORRASHISSI



CIBES PARALLEL

Parallel-porrashissi on kehitetty erittäin huolellisesti ja kaikki yksityiskohdat huomioiden, mikä näkyy sen ulkonäössä, toiminnallisessa ergonomiassa ja erittäin ohuessa johteessa, joka sulautuu täydellisesti mihin tahansa sisustukseen. Laadukkaista materiaaleista valmistettu Parallel on paras ratkaisu suoraan portaikkoosi. Istuin on pienikokoinen ja silti todella miellyttävä. Erityisen ohut johde täydentää portaidesi ulkoasun sievästi. Parallel-porrashissi on suunniteltu päivittäiseen käyttöön.



PARALLEL-hissin ominaisuudet

- Erityisen ohut, tyylikkäästi muotoiltu johde
- Sulautuu hyvin mihin tahansa sisustukseen
- Vie kompaktin muotoilunsa ansiosta vain vähän tilaa
- Ensiluokkainen viimeistely ja korkea laatu



CIBES PARALLEL

Äärimmäisen kompakti



Parallel-mallin istuin on äärimmäisen kompakti. Lisäksi johde on mahdollisimman ohut eikä tarvitse kuin 85 mm tilaa.

CIBES PARALLEL

Älykkäitä ratkaisuja ja vaihtoehtoja



Tekstiili



Kerma



Vihreä



Punainen



Sininen



Antrasiitti

Synteettinen nahka



Viini



Mariini



Kastanja

→ Lisävarusteena: automaattisesti kokoon taittuva johteenpätkä portaikkosi alapäässä pitää oven edustan tai kulkuväylän esteettömänä.

→ Valitse mieleisesi verhoilu.

CIBES PARALLEL on suunniteltu helppokäyttöiseksi.
Hissin käyttö sujuu luontevasti, ja olet pian sinut sen kanssa.

VAIHE 1

Kutsu hissi luoksesi
langattomalla kauko-ohjaimella.



VAIHE 2

Taita istuin alas.



VAIHE 3

Istuudu mukavasti.



VAIHE 4

Hissi alkaa liikkua pehmeästi
ja äänettömästi.



VAIHE 5

Hissi pysähtyy automaattisesti,
kun matka päättyy portaiden
ylä- tai alapäässä.




VAIHE 6

Poistu istuimesta turvallisesti
kääntämällä istuinta kätevästi.



Tekniset tiedot

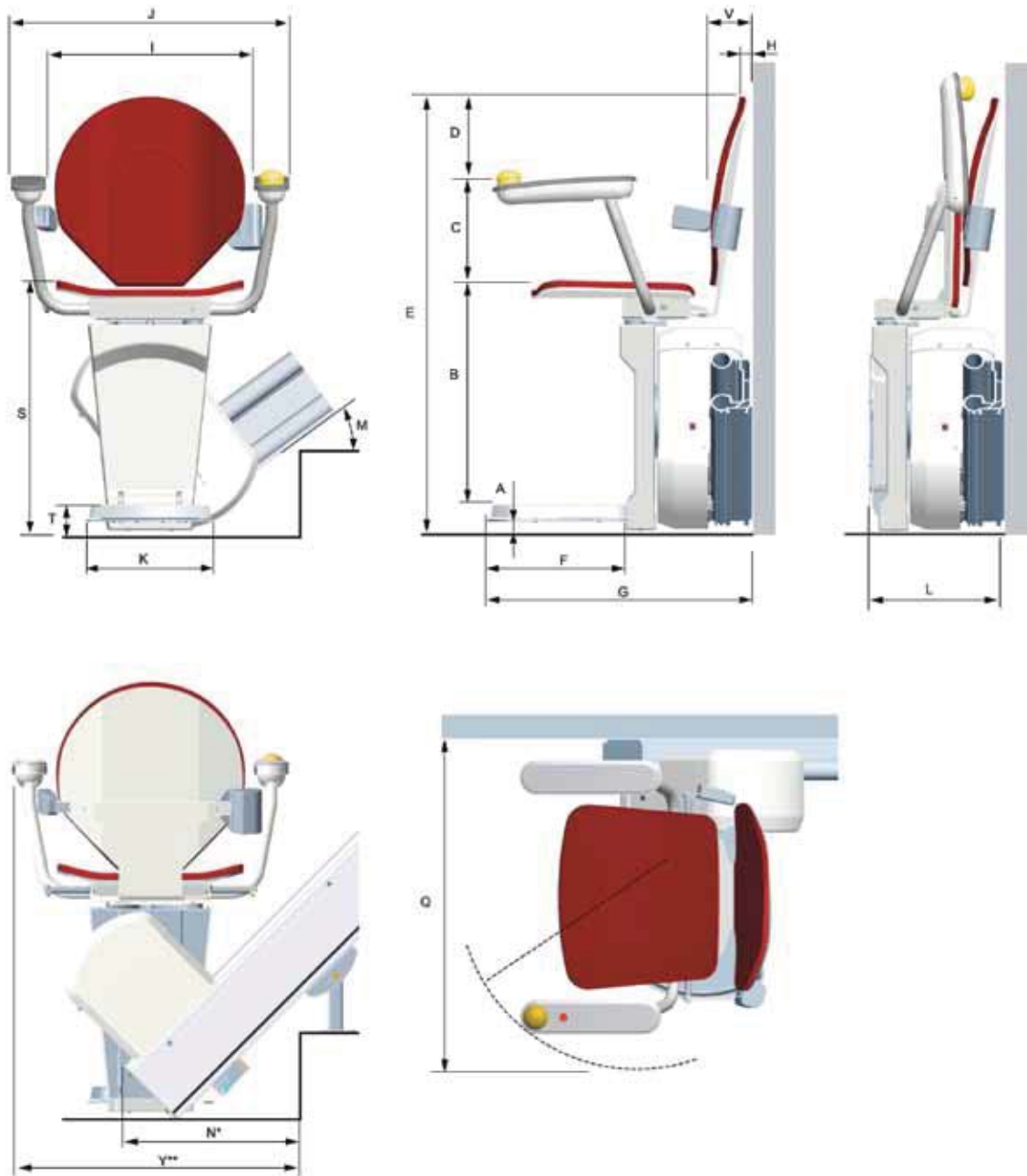

Tämä tietolomake on tarkoitettu vain viitteeksi. Kaikkiin esitettyihin, seiniltä otettuihin mittoihin vaikuttavat kaikki mahdolliset esteet, jotka on tutkittava läpikotaisin. Mitat ovat millimetreinä. Tämän tietolomakkeen tiedot ovat suuntaa-antavia.

A	Lattiasta jalkatuen pohjaan	40	K	Jalkatuen leveys	270
B	Jalkatuen yläpinnasta istuimen yläpintaan	450	L	Leveys jalkatuki taitettuna	285
C	Istuimen yläosasta käsinojen yläosaan	235	M	Nousukulma	28-56°
D	Käsinojen yläosasta selkänöjan yläosaan	165	N	Johteen etuosasta ensimmäiseen askelmaan (45° aloitus)*	390
E	Kokonaiskorkeus	930	Q	Vähimmäiskääntösäde seinästä	660
F	Jalkatuen pituus	310	S	Istuimesta seinään	580
G	Jalkatuen etuosasta tukijalan takaosaan	560	T	Jalkatuen yläosasta lattiaan	85
H	Selkänöjasta seinään (vähintään)	8	V	Istuimen takaa (sisäpuoli) seinään	100
I	Käsinojen välinen leveys	430	Y	Käsinojasta ensimmäiseen askelmaan (45° aloitus)**	510
J	Kokonaisleveys	585			

* 56° aloitus: **335**

** 56° aloitus: **595**



ISTUIN

Istuintyyppi Erittäin kompakti istuin, jota voi kääntää vasemmalle tai oikealle portaiden yläpäässä, jotta istuimesta poistuminen olisi turvallista.

Materiaalit Teräsrunko, istuimessa ja selkänojassa paloa hidastava verhoilu.

Viimeistely Kaikki teräsosat on pulverimaalattu.

Käsinojat Valetut, alumiiniset käsinojat, joiden teräksiin käsivarsitukiin on asennettu polypropeenipeitteet.

Kytkimet Pääkytkin ja ohjauskytkin sijaitsevat molemmat samassa käsinojassa.

Kuormitus 130 kg korkeintaan 56° kaltevuudessa.

Turvallisuus Turvavyö ja turvakytkimet sivupaneeleissa, hissien alla ja jalkatuessa. Ylinopeusrajoitin.

HISSI

Rakenne Hitsattu teräsrunko, valettu alumiinimoottori/-vaihteisto.

Viimeistely Pulverimaalattu.

Moottori Tasavirtamoottori 24 V 300 W.

Liikkeellelähtö Pehmeä liikkeellelähtö ja pysähdys.

Elektroniiikka Mikroprosessorilla varustettu moottorinohjausyksikkö.

Akut 2 x 12 V, 7 Ah.

Melutaso Suurin käyttöäänäni 40 dBA.

JALKATUKI

Rakenne Hitsattu teräsrunko, joka on peitetty liukumattomalla TPE-kerroksella.

Viimeistely Kaikki teräsosat on pulverimaalattu.

Taittaminen Jalkatuki taitetaan kokoon käsin.

Turvallisuus Alapuolella on turvaohja, joka toimii molempiin kulkusuuntiin.

JOHDE

Rakenne Puristetut alumiinijohteet.

Viimeistely Eloksoitu.

Kiinnitys Yksinkertaiset tukijalat ja pohjalevy, kiinnitetty ruuveilla vain portaikkoon.

Myös seinäkiinnitys on mahdollista.

Enimmäispituus 8 metriä

Johteen johdotus Johteen läpi.

Käyttötekniikka Hammaskisko ja hammaspyörä.

Enimmäiskaltevuus 56°.

Aloituspaihtoehdot Taitettava johde.

MUUT OSAT

Kauko-ohjain Infrapunakauko-ohjaimet kevyillä kosketuskytkimillä, toimii kahdella AA-paristolla.

Latausyksikkö Seinäasennus.

hissipörssi.fi

- esteetöntä elämää -

Oulun Turvatekijä Vilho Hiltunen

Y-tunnus 2632068-6

www.turvatekija.fi

vilho.hiltunen@turvatekija.fi

puh. 045-1132434